

# OBI


ITALIANO Cod. 22051 17/05/2011



OBI ha superato il CRASH TEST per il trasporto del passeggino, in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)



È vietata la riproduzione anche parziale, senza l'autorizzazione del costruttore. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

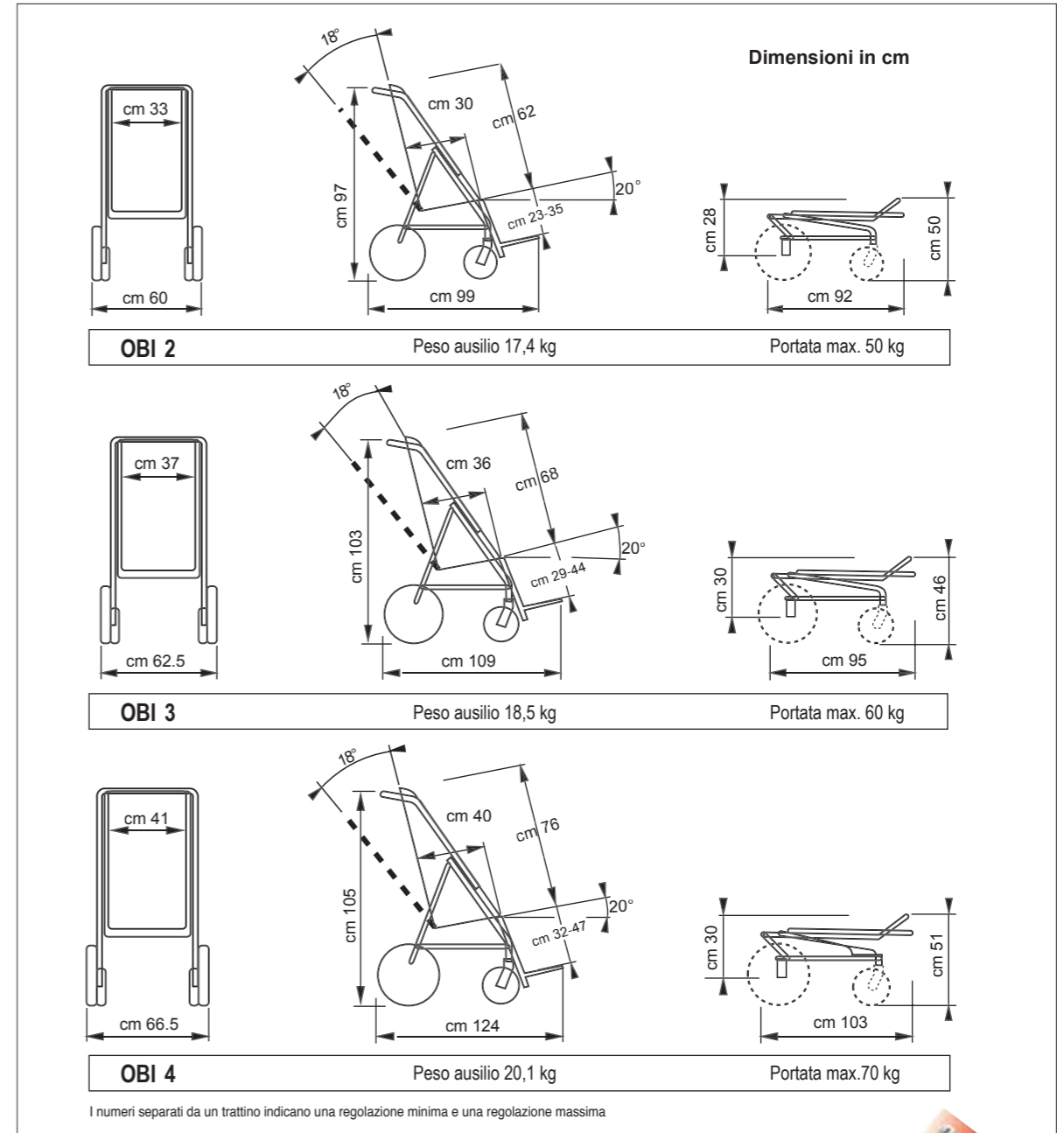

PRODOTTO MARCATO **CE**

Prodotto certificato dall'Istituto **CERAH** Francia



**CRASH TESTED**  
secondo la normativa ISO 7176/19

Rivenditore autorizzato

design and quality  
MADE IN ITALY since 1980

**ORMESA**

**ORMESA** s.r.l.

Via A. Da Sangallo, 1 06034 FOLIGNO (PG) ITALY  
TEL. +39 0742 22927 - FAX +39 0742 22637  
info@ormesa.com - www.ormesa.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

# caratteristiche tecniche

**Telaio pieghevole** in acciaio e alluminio. Verniciatura epossidica atossica

**Cuscino asportabile**, rivestito con tessuto in microfibra di TREVIRA IGNIFUGO, lavabile in lavatrice a 30° (per la pulizia di macchie speciali VEDERE LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO) colori resistenti

**Scocca in nylon** "CORDURA DU PONT" di aspetto naturale, resistente all'uso prolungato, lavabile con acqua



Riconducibile ai **Codici ISO** 12.27.03.006 + 12.24.03.109

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 154988/R

- 1 - Asole per il poggiatesta
- 2 - Asole per la cinghia a bretellaggio
- 3 - Bordi laterali di protezione sul telaio
- 4 - 828 cintura addominale in dotazione
- 5 - Asola per l'inserimento del divaricatore
- 6 - Regolazione a scatto per l'altezza della pedana
- 7 - Pedana ribaltabile con battitacco
- 8 - Ruote anteriori imperforabili da cm. 17 pivotanti, con cuscinetti a sfera.
- 9 - Ruote posteriori pneumatiche da cm 30, scorrevoli su cuscinetti a sfera. Su richiesta sono fornibili con gomma imperforabile
- 10 - Freni indipendenti, leggeri per l'azionamento e robusti per il servizio. Non hanno sporgenze pericolose
- 11 - Bloccaggio chiusura telaio



**Schienale rigido, reclinabile** su 4 posizioni con semplice bloccaggio a scatto.  
**Sedile rigido** fisso.  
**Poggiagambe reclinabile** con bloccaggio rapido

La riproduzione anche parziale è vietata. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

# accessori



**834 - Divaricatore imbottito**  
 Ricond. al Cod ISO 12.27.03.118



**835 - Poggiatesta con protezioni parietali**  
 Cod. ISO 12.27.03.133

Costituito da due elementi laterali, utilizzabili anche singolarmente (solo a destra o solo a sinistra). Capovolgendoli varia la posizione in altezza.



**853 - Cinghia a bretellaggio**  
 Cod. ISO 12.27.03.115



**812 - Direziontori ruote anteriori**  
 Ricond. al Cod. ISO 12.06.09.145



**817 - Fasce inguinali**



**816 - Cuscinetti di spinta laterale**  
 Cod. ISO 12.27.03.121X2



**827 - Cinturini fermapiedi**  
 Ricond. al Cod. ISO 12.27.03.130



**839 - Appoggiamani**  
 Cod. ISO 18.09.39.154



**894 - Cinghia pelvica a 45° per bacino**  
 Cod. ISO 18.09.39.163



**858 - Cestino in rete**



**824 - Tavolo con incavo avvolgente**  
 Ricond. al Cod. ISO 12.27.03.127



**837 - Tavolino normale**  
 Ricond. al Cod. ISO 12.27.03.124



**819 - Cappottina**



**825 - Sacca parapoggia**, utilizzabile solo con la cappottina 819



**818 - Sacca termica**



**832 - Base alternativa** per passaggi e ascensori stretti (riduce la larghezza esterna di 7 cm).  
 Ruote imperforabili e leggere, scorrevoli su cuscinetti a sfera, posteriori da cm 20, anteriori da cm 17



**891 - Ancoraggi (4 anelli)** per il trasporto, in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus ecc..)

**ATTENZIONE:**

- adatti per cinture a 4 punti di ancoraggio omologate ISO 10542 in dotazione al veicolo
- Il bambino deve indossare sia una cintura pelvica che una cintura diagonale per il torso omologate ISO 7176-19 o ISO 10542. Le cinture posturali come la 828, 853, 894, 903, 906 non sono omologate per l'uso come sistemi di ritenuta
- Il veicolo deve essere idoneo al trasporto di passeggeri ortopedici secondo le leggi vigenti
- leggere le avvertenze e le istruzioni date nel manuale d'uso e manutenzione



**833 - Base alternativa con ruote da 12 cm**