



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DUECENTOTRE5

Benessere diffuso: traspirabilità ed affidabilità.

La Duecentotre5 di Ormesa è una carrozzina **contentiva** altamente performante, la soluzione ideale per tutti gli utenti che necessitano di un **sistema di seduta sicuro, ergonomico e in grado di garantire una postura ottimale in ogni occasione.**

La conformazione dello schienale e lo speciale rivestimento di tutta la seduta garantiscono **traspirabilità e comfort.**

La regolazione della reclinazione con molla a gas consente di **modificare la posizione in modo facile e confortevole** per tutto il giorno.



Nuovi colori del telaio

Vantaggio del trattamento di verniciatura:

- **Impatto ambientale ridotto durante il processo produttivo**, in linea con le politiche di **sostenibilità ambientale** adottate dalla nostra azienda;
- **garanzia di performance elevate**, grazie all'utilizzo di resine epossidiche ed atossiche durature e resistenti;
- **agevola la pulizia superficiale**, non lasciando impronte.

PRODOTTO
MARCATO 

203-5 è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745





Praticità al servizio del comfort

Lo **schienale avvolgente e contenitivo** ha una conformazione tale da evitare contatto e compressioni lungo i corpi vertebrali. **Regolabile su due posizioni** in profondità.

La **seduta leggermente basculata**, rivestita da un materiale esclusivo, evita lo scivolamento in avanti dell'utente.

Il **poggiatesta** ampio, con rivestimento **antibatterico**, garantisce un corretto posizionamento del capo nei casi di scarso controllo. Regolabile in inclinazione, altezza ed in senso antero-posteriore.

Queste caratteristiche rendono la carrozzina **Duecentotre5** un **ausilio in grado di migliorare sensibilmente la qualità di vita dell'utilizzatore** e di ridurre al minimo gli sforzi per l'assistente.

Caratteristiche tecniche e regolazioni



Rivestimento

Sedile e schienale accolgono le forme delle spalle e dei glutei e sono rivestiti da uno speciale materiale esclusivo: **ignifugo, visco-elastico, indistruttibile, igienico, lavabile e traspirante.**



Schienale

Regolabile in inclinazione tramite molla a gas.




Seduta ergonomica

disponibile in tre larghezze (40, 45 e 50 cm). Regolabile su due posizioni in profondità.



Sistema blocco di sicurezza

pratico e sicuro per regolare in profondità il tavolo ergonomico.

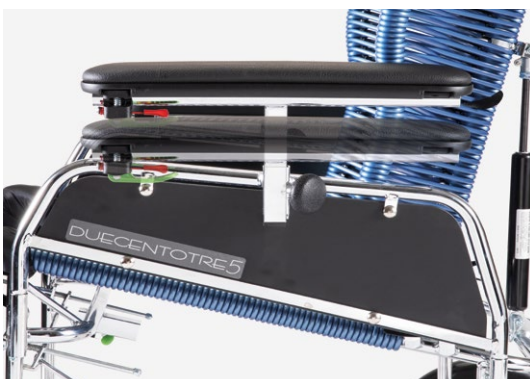

Fianchi chiusi

estraibili e girevoli lateralmente con **braccioli** regolabili in altezza.



Poggiagambe

regolabile in altezza e inclinazione, con grande fascia di sostegno ai polpacci e imbottiture laterali.



Pedana unica

ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'operatore e la salita/discesa dell'utente.



Ruote

Anteriori da 17,5 cm (misura 40 e 45) e da 20 cm (misura 50).

Posteriori da 30,5 cm con **freno a tamburo** a comando unico e imperforabili.

Componenti



824-R tavolo reclinabile, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza.

824-F tavolo fisso, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza.

Tavolo costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



896 Tappezzeria tavolo
Asportabile per il lavaggio.



834 Cuneo Divaricatore imbottito Regolabile in altezza ed in antero-posteriore.



894 Cintura pelvica a 45°



827 Cinturini fermapiedi



892 Tappezzeria imbottita per pedana Asportabile per il lavaggio.



836 Tappezzeria schienale, sedile e poggiatesta
Asportabile per il lavaggio.




933 Asta portaflebo




DuecentoTre5 misure e pesi

	misura 40	misura 45	misura 50
A: larghezza sedile	40 cm	45 cm	50 cm
B: larghezza ruote	52 cm	57 cm	62 cm
C: larghezza schienale	49 cm	54 cm	59 cm
D: ingombro in larghezza	59 cm	64 cm	69 cm
Peso Ausilio	25,4 Kg	26 Kg	26,5 Kg
Portata Massima	100 Kg	110 Kg	110 Kg
Altezza Utente	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm

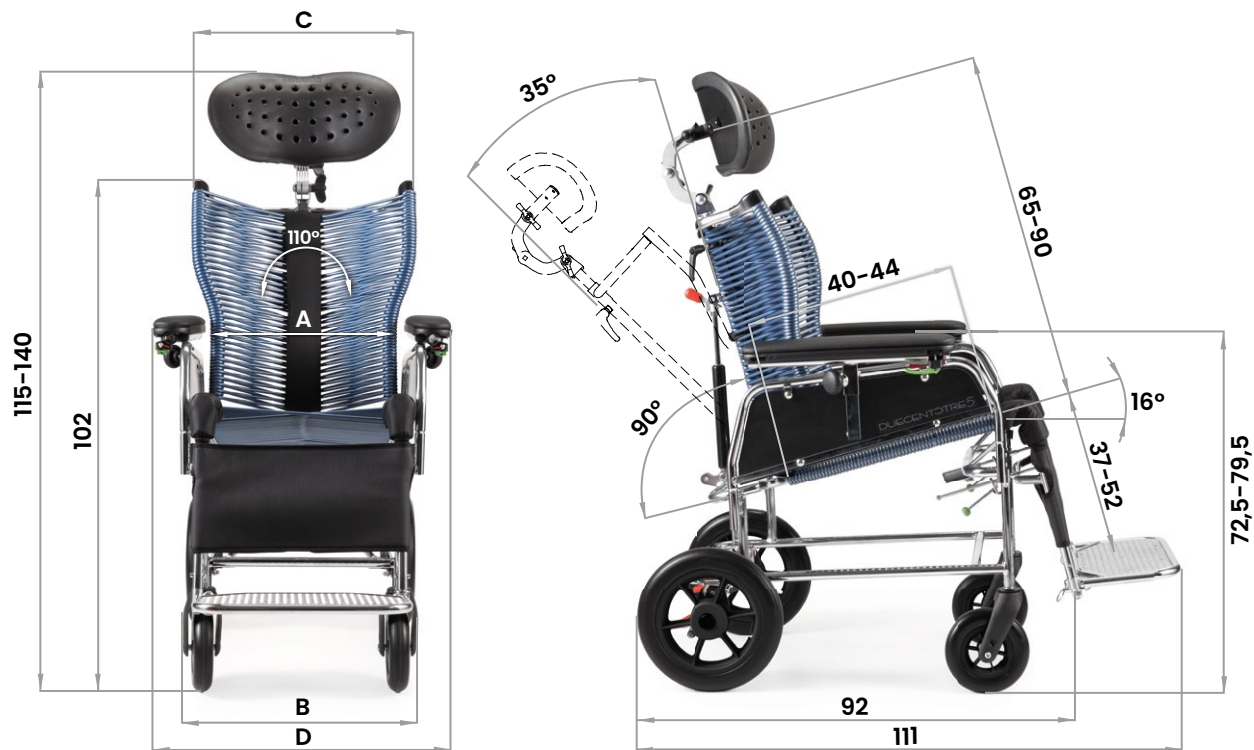



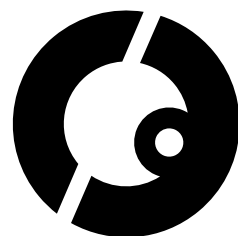

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

