



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Trollino

Adatto ad ogni contesto





Stabilità, praticità e comfort: tutto in uno.

Il **Trollino** di Ormesa è un **passsegino per bambini e ragazzi** compatto e leggero, l'ideale per spostarsi in ogni contesto.

È facile da gestire grazie al **sistema brevettato a livello internazionale** che permette di **chiuderlo con una sola manovra**. Chiudendolo non aumenta la sua lunghezza, **occupando il minimo ingombro**.

Il Trollino ha una **struttura stabile e resistente** garantita dalla **doppia crociera** posizionata dietro lo schienale e sotto la seduta che conferisce maggiore stabilità e comfort.

La **tappezzeria** è **realizzata con materiali tecnologici all'avanguardia**: è estremamente **traspirante, resistente, facilmente lavabile, ignifuga**. Disponibile in **quattro colori**: rosso, blu, rosa e nero.

Grazie a un'**ampia gamma di componenti disponibili**, risponde facilmente ad ogni esigenza.



Trollino ha superato il CRASH TEST secondo le norme **ISO 7176/19** e **ANSI RESNA WC/19**.

PRODUCT
MARKED



TROLLINO è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745





Pratico e leggero

Si adatta al tuo stile di vita dinamico



Il **Trollino** è dotato di un **telaio pieghevole** in alluminio, verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Una volta chiuso rimane compatto: questo permette di **trasportarlo** sulle ruote posteriori **come fosse un trolley da viaggio**.

Il suo **peso ridotto** e la **semplicità di chiusura**, rende semplice qualsiasi sollevamento o spostamento: perfetto se hai bisogno di riporlo nella macchina o di prendere i mezzi pubblici. Le **ruote si adattano ad ogni tipo di terreno** offrendo massimo comfort sia alla mamma che al bambino. È così maneggevole che **si spinge anche con una sola mano**.

Trollino è la **soluzione ideale** per le famiglie dinamiche spesso in viaggio e che sono alla ricerca di **stabilità, praticità e comfort, tutto in uno!**



Tappezzeria smart

Rivestimento all'avanguardia



La tappezzeria del Trollino ha una struttura all'avanguardia a **nido d'ape**, quindi **estremamente traspirante a contatto con la pelle**. La struttura del tessuto crea una "camera d'aria" che consente sia la **circolazione dell'aria per una massima traspirazione**, sia un **isolamento termico naturale** efficace.

Il doppio strato è garanzia di:

- > **Igiene:** grazie all'eccellente traspirabilità, riduce la sudorazione e la formazione dei batteri.
- > **Lavaggio:** nonostante non sia estraibile, la composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio.
- > **Tempi di asciugatura rapidi.**
- > **Resistenza:** Alta resistenza all'abrasione. La trama ad elevata resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test ISO 12947).
- > **Ignifugicità** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.



Scegli il tuo stile: quattro div

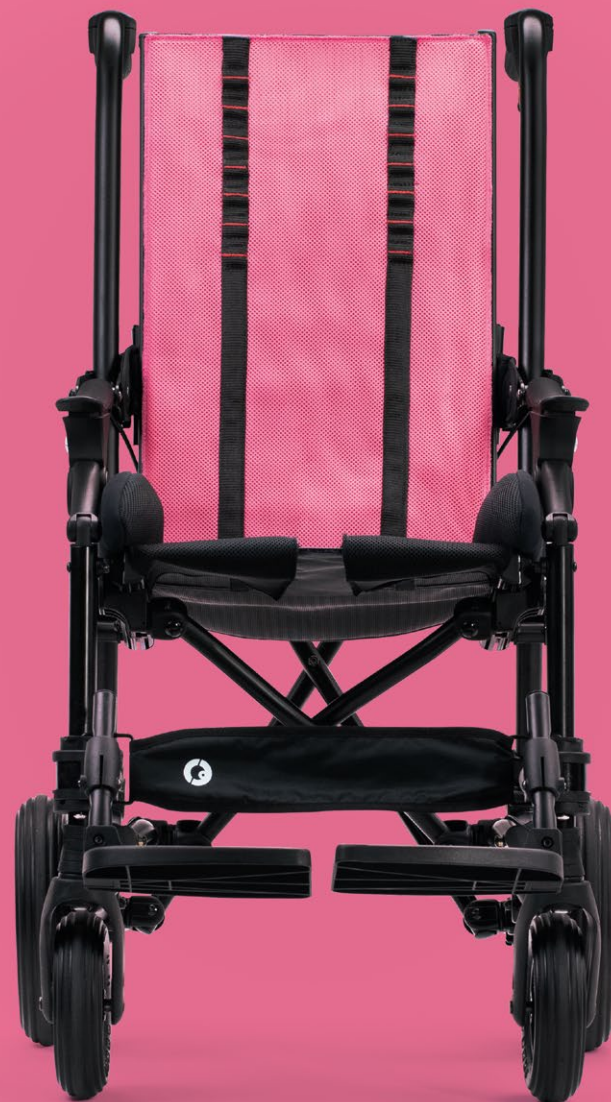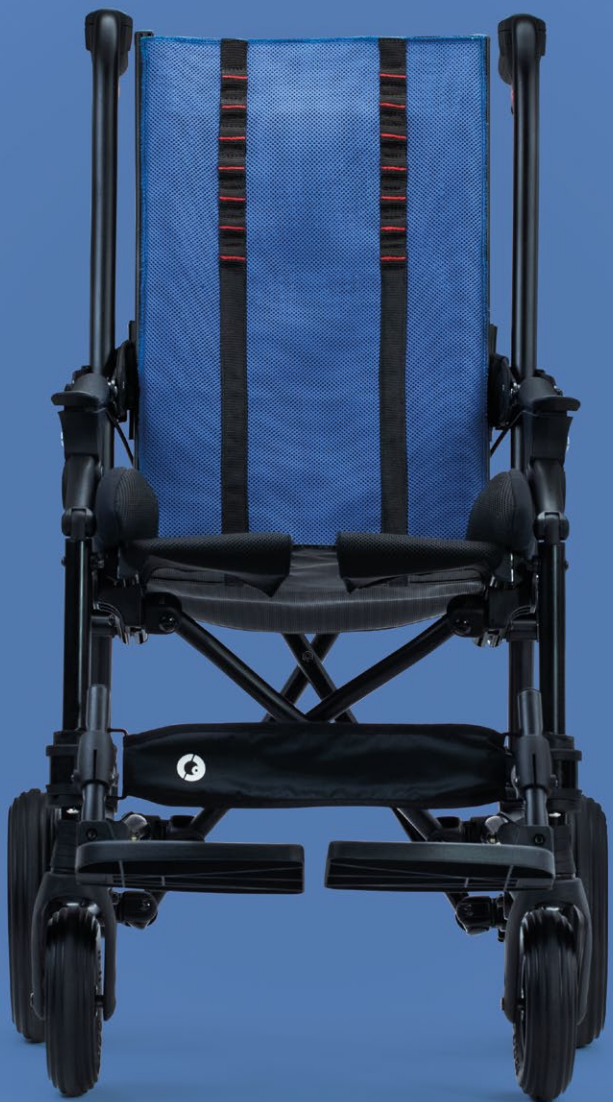

erse colorazioni per ogni personalità



Caratteristiche tecniche e regolazioni



Schienale

Reclinabile su tre posizioni. Regolabile in altezza a scorrimento in modo semplice, senza il rischio di perdere la vite. Presente sul retro la borsetta per riporre il manuale e la chiave in dotazione. La crociera posteriore garantisce stabilità, comfort e resistenza.



Seduta

Ergonomica e leggermente basculata per impedire lo scivolamento del bacino e garantire maggior comfort. Regolabile in profondità a scorrimento e in larghezza tramite pelotte al bacino imbottite. Regolazione semplice senza il rischio di perdere la vite. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.



Maniglie

di spinta con freni manuali e di stazionamento. Utilissime per gestire il passeggino nei diversi contesti. Regolazione in altezza con componente 951.



Poggiagambe

regolabile in altezza

Pedane

ribaltabili e girevoli in linea con il telaio senza ingombro. Regolazione in inclinazione con componente 956.

Presente anche la fascia poggiapolpacci per un maggiore comfort.



Ruote

con profilo originale "Ormesa Design". Imperforabili, leggere e **adatte a tutti i tipi di terreni**.

Ruote anteriori: piene, piroettanti da 7" (17 cm).

Ruote posteriori: piene da 10" (25 cm), con **freni indipendenti a tamburo**.

Leva di superamento gradini su entrambe le ruote posteriori.



Componenti

L'importanza di una seduta ergonomica

Per noi **comfort ed ergonomia sono valori irrinunciabili:**

Trollino non solo fa sentire gli utenti sicuri ed estremamente comodi ma contribuisce ad offrire una postura ottimale e stabile nelle circostanze più disparate.

Dallo schienale alla seduta, passando per i poggiatesta e le pelotte toracali, **ogni elemento di Trollino è regolabile in maniera semplice e intuitiva.** Inoltre, con il suo set di componenti disponibili, offre possibilità di adattamento e comfort senza limiti.

Facili da applicare e rimuovere, maneggevoli e resistenti, i componenti di Trollino sono progettati nei minimi dettagli.

Il sistema brevettato a livello internazionale permette di **chiuderlo** con una sola manovra anche **con i componenti montati** per **garantire un'esperienza di utilizzo pienamente soddisfacente.**


Componenti




835 Poggiatesta contenitivo e sagomato
regolabile in altezza.



865 Poggiatesta imbottito
regolabile in altezza.

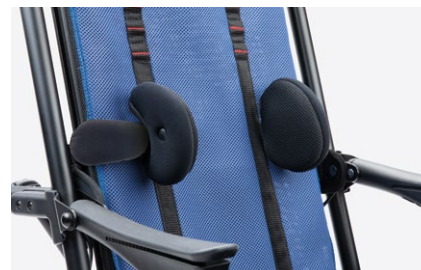

838 Pelotte toracali
regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibile in due misure.

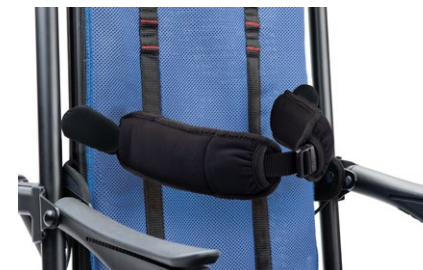


868 Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco.
regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.




947 Cintura pelvica ad angolo variabile
Disponibile in due misure.



920 Cintura pelvica a quattro punti
Disponibile in due misure.

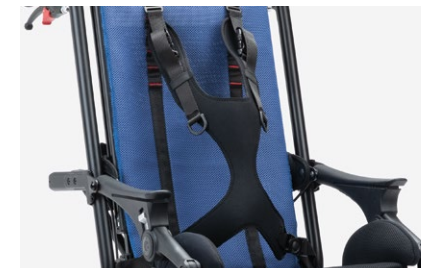

853 slim Pettorina sagomata a quattro punti

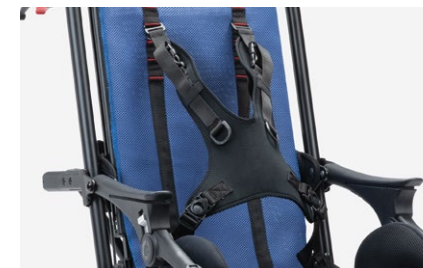


853 Pettorina a bretellaggio
Disponibile in due misure.

Componenti



834N Divaricatore imbottito
estraibile.

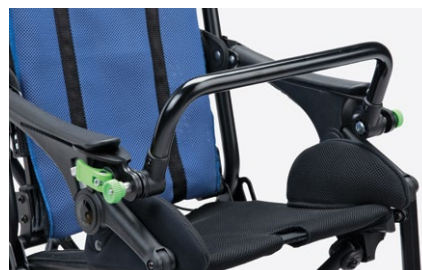

839 Poggiamani
regolabile in inclinazione. Facilmente
estraibile per la chiusura.



819 Cappottina
elevabile, con borsetta posteriore. Non occorre toglierla. **Si chiude con il telaio.**



NEW




825 Sacca parapioggia
da fissare alla cappottina 819.

NEW




**825B Telino posteriore con
protezioni laterali.**
Si fissa facilmente alla cappottina 819
tramite zip e bottoni automatici, per
una maggiore protezione dal vento e
dalla pioggia.

NEW

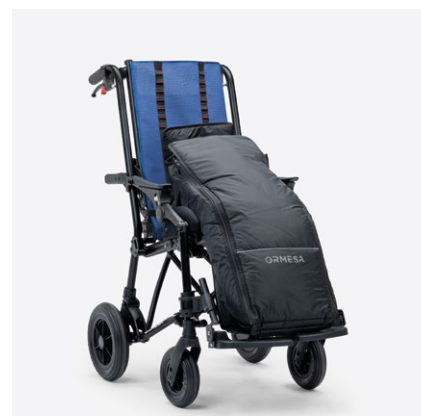

818 Sacca termica

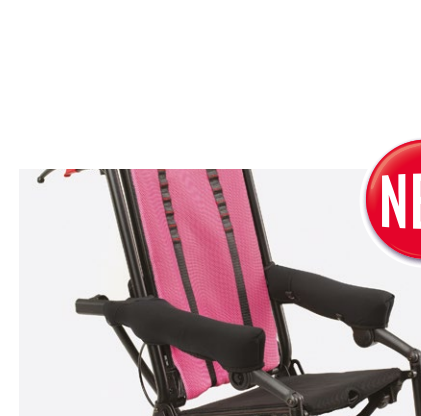

968 Imbottiture per braccioli
facilmente estraibili e lavabili.

NEW

Componenti



960 Fermatalloni



956 Pedane con regolazione dell'inclinazione



858 Cestino portaoggetti



812 Direzionatori ruote anteriori



844 Imbottiture laterali al telaio.



951 Maniglie di spinta regolabili in altezza, senza l'uso di attrezzi!
Aumenta l'altezza massima di 7 cm (98-105 cm).



891 Ancoraggi (anelli)

Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati...)
Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.




Trollino misure e pesi



A: 28 cm con pelotte al bacino imbottite, 32 cm togliendo uno spessore interno, 36 cm senza pelotte al bacino.

Gaia e la sua storia vi aspettano nel sito ufficiale di Ormesa, assieme agli altri protagonisti della nostra fantastica community globale.



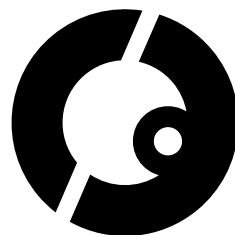

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

