



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO
adaptive seating





Più di un semplice seggiolone.

Grillo Adaptive Seating di Ormesa è un **seggiolone a configurazione regolabile per bambini e ragazzi compatto, ideale per essere utilizzato in molti contesti**, come lo svolgimento di attività quotidiane a scuola e a casa.

Il **sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale** e tipico della **"famiglia di prodotto GRILLO"** consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.

Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria portante **estremamente traspirante, resistente, facilmente lavabile e ignifuga**.

Il rivestimento estraibile è realizzato con un'**imbottitura altamente innovativa**: Il materiale permette un'**ottimale distribuzione del peso**, una **traspirazione elevatissima** ed ha un **comfort eccellente**. Disponibile in **tre colori: rosso, rosa e blu**.

Grazie ad un'**ampia gamma di componenti disponibili**, si adatta facilmente ad ogni esigenza. Disponibile in **tre misure**.

PRODOTTO
MARCATO 

GRILLO ADAPTIVE SEATING è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



Tre configurazioni per soddisfare ogni esigenza

Grillo Adaptive Seating di Ormesa è un ausilio studiato per **venire incontro alle esigenze di grandi e piccoli**: i genitori sanno che il seggiolone diventa un oggetto fondamentale nello sviluppo del bambino per lo svolgimento di qualsiasi attività; il bambino implementa la capacità di vedere il mondo circostante con una nuova prospettiva, di sentirsi più partecipe nelle attività quotidiane e di comunicare con gli altri in un modo tutto nuovo. Nascono così tre configurazioni differenti per soddisfare ogni necessità:

- › Grillo Adaptive Seating con **componente 863 poggiatesta esterno posturale** adatto per bambini che necessitano di un supporto regolabile in inclinazione e profondità.
- › Grillo Adaptive Seating con **componente 865 poggiatesta imbottito** oppure **componente 835 poggiatesta sagomato**, in base alle necessità di contenimento laterale ed occipitale del capo.





**863 Poggiatesta
posturale** che si adatta
alla conformazione del
capo. Regolabile in altezza,
inclinazione e profondità.




**865 Poggiatesta
imbottito**
regolabile in altezza.



**835 Poggiatesta
sagomato**
con contenimento laterale
ed occipitale, regolabile in
altezza.

Alta performance

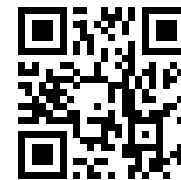

Doppio rivestimento all'avanguardia



La tappezzeria premium abbinata al tessuto portante non estraibile, oltre ad offrire un'**ottima stabilità** a tronco e bacino, garantisce un **altissimo livello di traspirabilità**, a vantaggio del comfort e della salute della cute.



- **Ottimale "self supporting effect"**: la struttura dell'imbottitura, altamente innovativa, permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed offre un ottimo comfort. La pressione viene distribuita in modo ottimale con una significativa riduzione della pressione puntuale.

Ha una **resistenza a compressione** (Compression stress value) (DIN EN ISO 3386) maggiore rispetto alla tradizionale gommapiuma.

- **Leggero e traspirante**: garantisce una circolazione dell'aria estremamente elevata, **riducendo la sudorazione** e favorendo la termoregolazione.

- **Igienico**: di facile lavaggio con tempi di asciugatura rapidi.
- **Resistente all'abrasione**: La trama del rivestimento ad elevata resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test ISO 12947).
- **Ignifugo**: secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Certificato Oeko-Tex**: per tutti i tessuti che sono a diretto contatto con la pelle, a garanzia di qualità e sicurezza per la salute.



Pratico e confortevole

La versatilità di cui hai bisogno

Grillo Adaptive Seating è dotato di un **telaio chiudibile** in alluminio, verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Il **sistema di regolazione in altezza brevettato** azionabile tramite molle a gas consente di modificare l'altezza del seggiolone, anche con il bambino seduto: ideale per farlo accedere a diversi piani di appoggio e di lavoro con estrema facilità e comfort e ad avvicinarlo a terra per facilitarne la discesa.

Il **sistema di sicurezza integrato**, impedisce l'azionamento accidentale.

Grazie al suo **design intelligente si adatta all'ambiente circostante**, permettendo al bambino di partecipare alle attività quotidiane ed interagire con la famiglia e con gli altri bambini.




4 RUOTINE PIROETTANTI CON FRENO, gommate e carterizzate, per evitare l'intrappolamento della sporcizia nel meccanismo di rotazione.

Consentono di spostare facilmente l'ausilio anche con il bambino seduto.



Caratteristiche tecniche e regolazioni

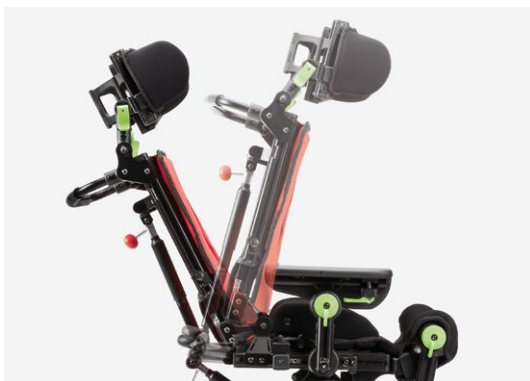


Schienale

Reclinabile in maniera semplice e sicura con molla a gas, con fulcro fisiologico per rendere la regolazione confortevole. Regolabile in altezza a scorrimento in modo semplice, senza il rischio di perdere la vite. Abbattibile per il trasporto.



Seduta

Ergonomica e basculabile tramite molla a gas per garantire maggior comfort. Regolabile in profondità a scorrimento, senza il rischio di perdere la vite, e in larghezza tramite pelotte al bacino multiregolabili.

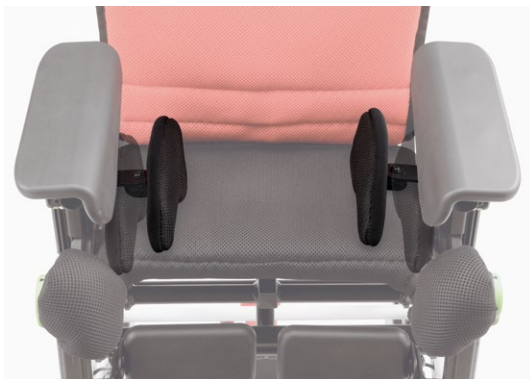

Pelotte al bacino multiregolabili

per un maggior contenimento. Regolabili in rotazione, larghezza e profondità.



NEW

Braccioli multiregolabili

morbidi e regolabili in altezza, inclinazione, rotazione e larghezza.



Poggiagambe

regolabile in altezza e inclinazione, in profondità insieme alla seduta, con fulcro fisiologico per rendere la regolazione confortevole.

Poggiapolpacci


morbidi, regolabili in altezza e profondità.

Poggiapiedi

ribaltabili e regolabili in flessione-estensione.

Compatta e stabile

regolazioni senza ostacoli

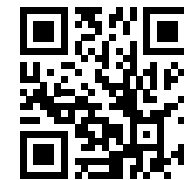

Componenti



947 Cintura pelvica ad angolo variabile

Disponibile in tre misure. Fornita di serie.



920 Cintura pelvica a quattro punti


Disponibile in due misure.



838 Pelotte toracali

regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibili in tre misure.


Rivestite con materiale traspirante ed estraibili per il lavaggio.

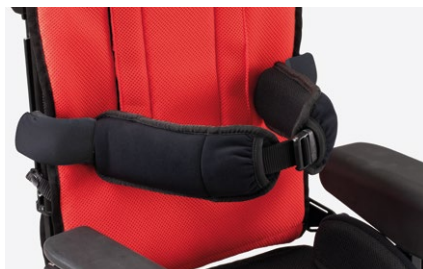

868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco

regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibili in due misure.

Rivestite con materiale traspirante ed estraibili per il lavaggio.

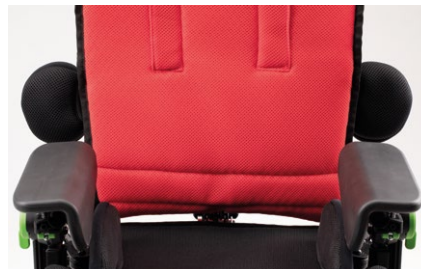

961 Pelotte per gomito

Rivestite con materiale traspirante ed estraibili per il lavaggio.




853 Pettorina a bretellaggio

Disponibile in due misure.

Componenti




853 slim Pettorina sagomata a quattro punti

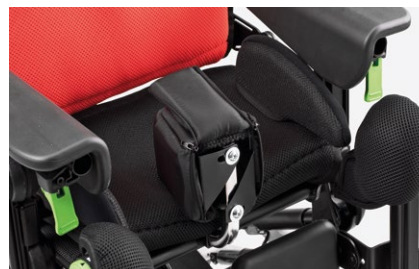

834R Divaricatore imbottito regolabile

in profondità e abduzione. Disponibile in due misure.

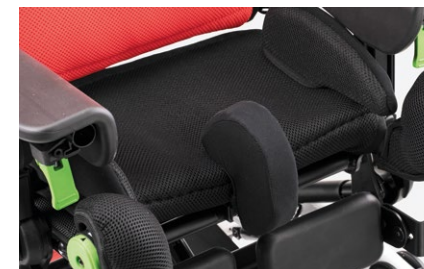

834N Divaricatore imbottito stretto

regolabile in profondità insieme alla seduta. Disponibile in due misure.



824 Tavolo con incavo avvolgente

regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.

Tavolo costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



960 Fermatalloni



962 Fermapiedi + Fermatalloni

Grillo A.Seating

misure e pesi




	A (cm)	B (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	L (cm)	M (cm)	altezza utente (H)	peso totale	portata max.
mini	16-26	16-26	30-41	30-50	12-15	15	49	59	15-25	68	75-105	20,4kg	25 kg
Small	20-30	20-30	35-47	35-60	15-18	17	53	65	20-31	68	90-120	22,6 kg	35 kg
Medium	25-35	28-43	40-55	40-70	16-20	20	58	74	25-40	70	110-145	24,3 kg	45 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

Tessa e la sua storia vi aspettano
nel sito ufficiale di Ormesa, assieme
agli altri protagonisti della nostra
fantastica community globale.



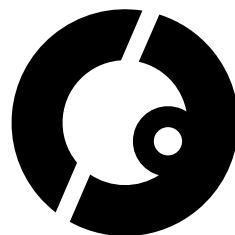

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

