

Il deambulatore GRILLO stimola e facilita lo schema del passo, allena a mantenere l'equilibrio del bacino e del tronco, organizza una visione più ampia e strutturata dello spazio, delle distanze e dell'ambiente che circonda il soggetto in posizione eretta, sviluppa l'autonomia fisica e l'indipendenza psicologica sperimentando la possibilità di operare da soli, senza l'aiuto di altri.

Grillo compensa la mancanza di equilibrio grazie ai supporti ergonomici e alla base stabile e consente così all'utente, di concentrare le proprie abilità residue solo nella deambulazione.

Grillo è versatile e personalizzabile grazie ai componenti intercambiabili senza l'uso di attrezzi.



Prodotto registrato FDA (USA)

Prodotto marcato CE



- **TELAIO LEGGERO** in alluminio, ABBATTIBILE per il trasporto e con **SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA BREVETTATO**.
- **SUPPORTO PELVICO** e **SUPPORTO TORACICO** imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza. Sostengono l'utente come fossero DUE MANI, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori. Il **SUPPORTO TORACICO** può essere regolato anche in inclinazione ed in senso antero-posteriore.
- **IMBRAGATURA ERGONOMICA** regolabile e facilmente removibile per il lavaggio. Sostiene l'utente in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- **MANUBRIO** removibile e regolabile, ha la funzione di un appoggiamani.
- **RUOTE** antiforatura e leggere: 2 anteriori

piroettanti con direzionatori; da cm. 15 (mis. mini e Small) e cm 17,5 (mis. Medium e Large) 2 posteriori piene fisse, da cm 20 (mis. mini e Small) e cm. 25 (mis. Medium e Large) adatte per uso interno ed esterno.

- Dispositivo **ANTI RETROMARCIA, FRENATURA REGOLABILE** e **FRENO DI STAZIONAMENTO** sulle ruote posteriori, facilmente azionabile tramite pedale rosso.
- **DIREZIONATORI** anteriori.
- **PARACOLPI** semielastici per la protezione contro gli urti.



**Attenzione!**  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

## ANTERIORE

Circonferenza interna supporto pelvico e toracico

da cm 74 a cm 120



**PESO AUSILIO KG 22,5**  
**PORTATA MASSIMA 90 KG**

## POSTERIORE

Circonferenza interna supporto pelvico e toracico

da cm 74 a cm 120




**PESO AUSILIO KG 21,7**  
**PORTATA MASSIMA 90 KG**

## DIMENSIONI UTENTE

ALTEZZA UTENTE (C):

GRILLO Medium, 110-165 cm

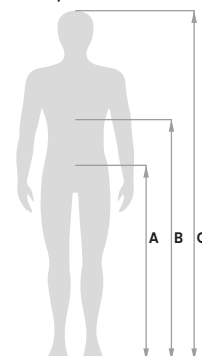

**IMPORTANTE:**

Assicurarsi che le altezze rappresentate in figura A e B rientrino nel range di misura indicato per i supporti.



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE: | DATA ORDINE:              |
|                      | DATA CONSEGNA:            |
| CODICE VALUTAZIONE   | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |
| ORM-                 |                           |



## Anteriore

## Posteriore

| SCEGLI LA CONFIGURAZIONE >                                                          | Anteriore                                                                                                |                                                                                        |                                                                                   | Posteriore                                                                                               |                                                                                        |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | PT                                                                                                       | PA                                                                                     | P                                                                                 | PT                                                                                                       | PA                                                                                     | P                                                                                 |
| <b>COMPONENTI AGGIUNTIVI</b><br>925, 924, 930: puoi scegliere la misura più piccola | <br>Comprendo di:<br>> supporto toracico<br>> supporto pelvico<br>> imbragatura ergonomica<br>> manubrio | <br>Comprendo di:<br>> supporto pelvico<br>> imbragatura ergonomica<br>> antibrachiali | <br>Comprendo di:<br>> supporto pelvico<br>> imbragatura ergonomica<br>> manubrio | <br>Comprendo di:<br>> supporto toracico<br>> supporto pelvico<br>> imbragatura ergonomica<br>> maniglie | <br>Comprendo di:<br>> supporto pelvico<br>> imbragatura ergonomica<br>> antibrachiali | <br>Comprendo di:<br>> supporto pelvico<br>> imbragatura ergonomica<br>> maniglie |
| 865 Poggiatesta multiregolabile                                                     | ND                                                                                                       | ND                                                                                     | ND                                                                                | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con supporto toracico 925                                    | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con supporto toracico 925                  | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con supporto toracico 925             |
| 925 Supporto toracico                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 924 Supporto pelvico                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
| 930 Imbragatura ergonomica                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
| 926 Manubrio                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | ND                                                                                                       | ND                                                                                     | ND                                                                                |
| 809 Antibrachiali                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/><br>con snodo                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/><br>con snodo                                             |
| 943 Cinturini per avambraccio                                                       | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con antibrachiali 809                                        | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con antibrachiali 809                 | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con antibrachiali 809                                        | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/><br>in combinazione con antibrachiali 809                 |
| 939 Maniglie ergonomiche                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/><br>con snodo                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                    | <input type="checkbox"/><br>con snodo                                             |
| 927 Manopole estraibili                                                             | ND                                                                                                       | ND                                                                                     | ND                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
| 919 Supporto lombare                                                                | ND                                                                                                       | ND                                                                                     | ND                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 918 Sedile pieghevole                                                               | ND                                                                                                       | ND                                                                                     | ND                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 815 Abduttore prossimale                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 946 Sella ergonomica                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 890-C Divisorio con cosciali                                                        | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 890-SC Abduttore distale                                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 810 Barre di appesantimento                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 923 Maniglione di spinta per assistente                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |
| 928 Ruote posteriori per base stretta con pedali. SOLO USO INTERNO                  | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                                                 | <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/>                                                          |