

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. **Base stretta**, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva**:
1) **si adatta alle forme** dell'utente e **impedisce il suo scivolamento**, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua **funzione di sostegno**)
2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**
3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali.** Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la **visualità** dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLE** imbottite e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO e CONTINUE**: basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPOLPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE** **PIENE: anteriori da 8"; posteriori da 12" con FRENI A TAMBURO** azionabili tramite un unico comando a pedale.



DM Marcato

Iscritto al RDM con n. 1338411/R

Carrozzina omologata per il trasporto in auto secondo le norme:

ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti Codici ISO:
18.09.18.012 18.09.18.220
18.09.18.202 18.09.18.235
18.09.18.205

I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI. JUDITTA è un ausilio con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi dell'art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCEBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".

Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

MISURA: ☐ 36 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50

COLORE TAPPEZZERIA: ☐ grigio scuro ☐ grigio chiaro

COLORE TELAIO: ☐ bianco ☐ nero

MISURE

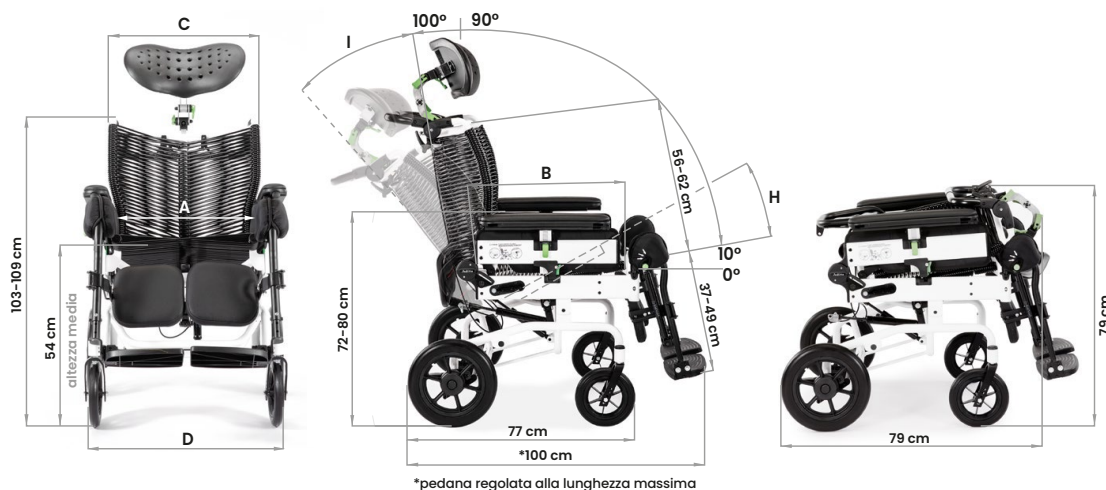

*pedana regolata alla lunghezza massima

	A larghezza seduta	B profondità seduta	C larghezza schienale	D ingombro in larghezza	H inclin. seduta (basculam.)	I inclinazione schienale	Peso Ausilio	Portata massima	Altezza utente
mis. 36	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	38 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
mis. 40	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	38 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
mis. 45	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	67 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	41 kg	130 kg	da 140 a 190 cm
mis. 50	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	72 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	42 kg	140 kg	da 140 a 190 cm

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

824-R Tavolo
reclinabile, regolabile in
inclinazione e profondità
con blocco di sicurezza
Cod. ISO 18.09.18.229



824-F Tavolo fisso,
regolabile in profondità con
blocco di sicurezza
Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127

**Costruito con materiale
resistente e leggero, igienico,
design senza spigoli, non
intrappola residui di cibo.**




894 Cintura
pelvica a 45°
Cod. ISO 18.09.39.163



834 Cuneo
divaricatore imbottito
regolabile
Riconducibile al Cod. ISO 18.09.18.223



891 Ancoraggi
(4 anelli) per l'ancoraggio
della carrozzina ai fini del
trasporto in veicoli omologati

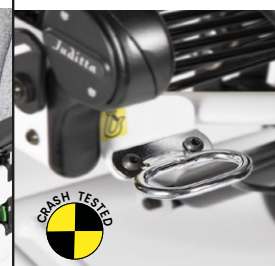

892 Tappezzeria
imbottita per pedana



905 Kit freno manuale



914 Bloccaggio
per pedana unica
Riconducibile al Cod. ISO 18.09.18.217



896 Tappezzeria imbottita per tavolo



916 Fascia
poggiagambe imbottita



932 Ruotine
antiribaltamento



933 Asta
portaflebo



936 Tappezzeria
asportabile per
poggiatesta



938 Tappezzeria impermeabile



Note: