



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

STANDY



STANDY[•]

Statica smart per il tuo benessere.

Standy di Ormesa è uno stabilizzatore per adulti e ragazzi con diversi gradi di abilità e autonomia in grado di garantire un'eccellente verticalizzazione.

Sicuro, versatile, facile da regolare: Standy è un ausilio in grado di fornire **stabilità e comfort in ogni situazione**, grazie anche a un set di componenti studiati per venire incontro ai bisogni particolari di ogni utente.

PRODOTTO
MARCATO 

STANDY è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745




Ergonomico

Design innovativo e funzionale

Standy è disponibile in due misure: Standy 3 per ragazzi e Standy 4 per adulti.

L'utilizzo di **Standy consente** e facilita la fisiologica **verticalizzazione della colonna vertebrale**, migliorando il **controllo del capo** e l'**orizzontalità dello sguardo**.

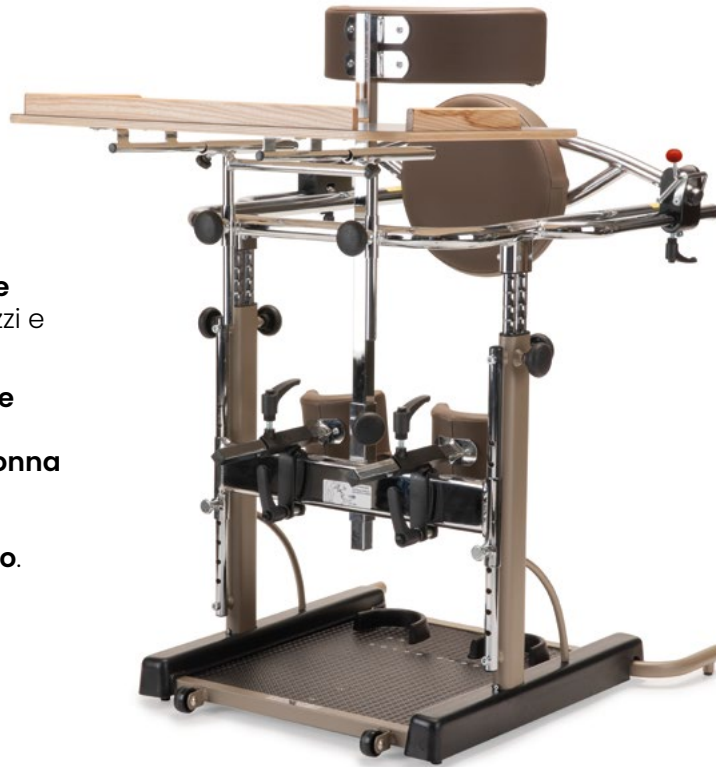

STANDY 3



STANDY 4

Progettato per migliorare la tua vita quotidiana

L'utilizzo di **Standy**, oltre ai benefici riguardanti la funzionalità dell'apparato osteoarticolare e il mantenimento della elasticità muscolare, **facilita l'uso degli arti superiori** grazie al contenimento garantito dai sostegni alle ginocchia, al bacino e al tronco.

Queste caratteristiche contribuiscono a migliorare la funzionalità delle mani e forniscono all'utente un **supporto fondamentale** nell'implementazione delle **attività di reaching**, rendendo lo Standy un **alleato fondamentale per il coinvolgimento degli arti superiori** nelle attività della vita di tutti i giorni.





Caratteristiche tecniche e regolazioni



Telaio

senza sporgenze. Più sicurezza, rotazione del tronco e libertà di movimento degli arti superiori sono facilitate. Regolabile in altezza con sistema "bloccaggio sicuro".



Tools free

regolazioni senza l'utilizzo di attrezzi ma tramite speciali pomelli, disegnati da Ormesa, con presa efficace e sicura. I pomelli mantengono efficacemente il serraggio attraverso un meccanismo interno che non segna e rovina il tubo.



Sostegno pettorale

imbottito e regolabile in altezza.



Tavolo

asportabile e regolabile in altezza e profondità.



Spinta posteriore

imbottita, regolabile in profondità con chiusura con blocco di sicurezza.



Sostegni per le ginocchia

imbottiti e regolabili in altezza, profondità e larghezza.



Fermatalloni

regolabili in profondità e in larghezza.



Pedana

antiscivolo con ruotine per lo spostamento senza l'utilizzatore.




Componenti



865 Poggiatesta

Regolabile in altezza, inclinazione e in antero-posteriore.

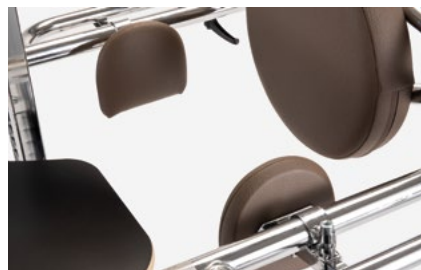

857 Spinta laterale per bacino



945 Asta apertura spinta posteriore



861 Set di 4 ruote con freni



902 Fermapiedi anteriori con cinturini

Standy misure e pesi


A: ingombro in lunghezza
 B: ingombro in lunghezza della base
 C: altezza pedana - spinta posteriore
 D: altezza pedana - sostegno pettorale
 E: ingombro in larghezza della base
 F: altezza pedana - ginocchiere
 G: ingombro in larghezza
 L: larghezza sostegno pettorale
 H: altezza utente
 Peso Ausilio
 Portata Massima


standy 3

89 cm
 76 cm
 da 63 a 93 cm
 da 81 a 121 cm
 69 cm
 da 24 a 49 cm
 74 cm
 30 cm
 da 110 a 160 cm
 30 kg
 90 kg

standy 4

100 cm
 85 cm
 da 72 a 106 cm
 da 84 a 129 cm
 79 cm
 da 30 a 57 cm
 80 cm
 39 cm
 da 135 a 180 cm
 38 kg
 120 kg

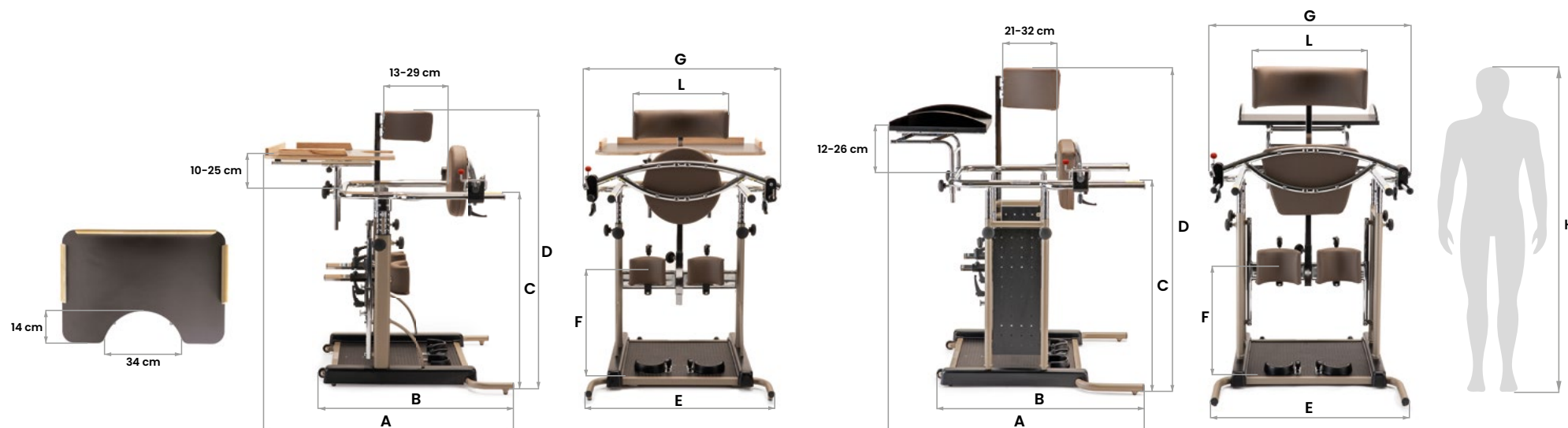

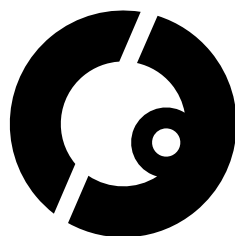

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com