

comprensivo della cintura pelvica ad
angolo variabile e pelotte al bacino



ISO 7176/19 e
ANSI RESNA WC/19



tappezzeria
altamente
traspirante ed
ignifuga



Marcato CE



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Più misure in un unico telaio**
- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Una volta chiuso il Trollino rimane compatto e può essere trasportato come un trolley da viaggio.
- **Maniglie** di spinta con **freni manuali e di stazionamento**.
- **Schienale** resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro. Reclinabile su tre posizioni e facilmente regolabile in altezza.
- **Seduta** leggermente basculata, facilmente regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte al bacino imbottite. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.
- **Tappezzeria** (non estraibile) estremamente **traspirante, resistente e facilmente lavabile**. **Ignifuga** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Borsetta** porta manuale e chiave sul retro dello schienale.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza.
- **Pedane** ribaltabili e girevoli senza ingombro.
- **Ruote** imperforabili: anteriori piroettanti da 7" (17 cm) e posteriori da 10" (25 cm) con **freni indipendenti a tamburo**. **Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote posteriori.

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

Colore Schienale Colore Seduta: **Nero** Colore Telaio: **Nero**


- Rosso
- Rosa
- Blu
- Nero

MISURE

Unità di Misura: cm .



Peso ausilio: 14,8 kg
Portata Massima: 55 kg

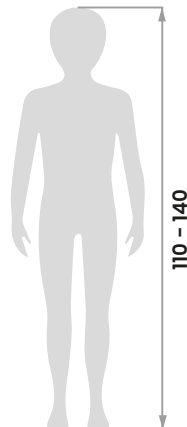

A: 28 cm con pelotte al bacino imbottite, 32 cm togliendo uno spessore interno, 36 cm senza pelotte.
*Range di regolazione in altezza con componente aggiuntivo 951 max. 105 cm.

951 Maniglie di spinta regolabili in altezza.
Senza l'uso di attrezzi.
OPZIONABILE SOLO SE ORDINATE CON IL PRODOTTO



OPZIONABILI SUCCESSIVAMENTE

865 Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.

S-M



835 Poggiatesta contenitivo e sagomato regolabile in altezza.

S-M



838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza inclinazione ed in senso trasversale.

mini S



868 Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco. Multiregolabili in altezza, larghezza ed inclinazione.

mini S/M



947 Cintura pelvica ad angolo variabile. Fornita di serie.

S M



920 Cintura pelvica a 4 punti

S M



853 Pettorina a bretellaggio.

mini S



853 slim Pettorina sagomata a quattro punti.

M



834N Divaricatore imbottito ed estraibile.



839 Poggiamani regolabile in inclinazione.



960 Fermatallon.



956 Pedane con regolazione dell'inclinazione.



858 Cestino portaoggetti.



819 Cappottina elevabile, con borsetta e finestrella posteriore. Si chiude con il passeggero, non occorre toglierla.



825 Sacca parapigioggia da fissare alla cappottina 819.



825B Telo posteriore di protezione da fissare alla sacca parapigioggia 825.




818 Sacca termica.



968 Imbottiture per braccioli



844 Imbottiture laterali al telaio

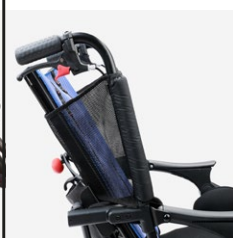

812 Direzionatori ruote anteriori.



891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli.



