

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE	NOME DESTINATARIO/UTENTE:
ORM-	

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. **Base stretta**, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva**:
  - 1) **si adatta alle forme** dell'utente e **impedisce il suo scivolamento**, con il risultato di un **ECCELLENTI COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua **funzione di sostegno**);
  - 2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**;
  - 3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**.
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali.** Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la **visualità** dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLI** imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE**: basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPLACCIA** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE: anteriori da 8"; posteriori da 12" con FRENI A TAMBURO** azionabili tramite un unico comando a pedale.



**DM Marcato**

Iscritto al RDM con n. 1338411/R

Carrozzina omologata per il trasporto in auto secondo le norme: **ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti Codici ISO:  
 18.09.18.012 18.09.18.220  
 18.09.18.202 18.09.18.235  
 18.09.18.205

I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI. JUDITTA è un ausilio con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi dell'art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".

**Attenzione!**  
 Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

MISURE

MISURA:  36  40  45  50

COLORE TAPPEZZERIA:  grigio scuro  grigio chiaro

COLORE TELAIO:  bianco  nero

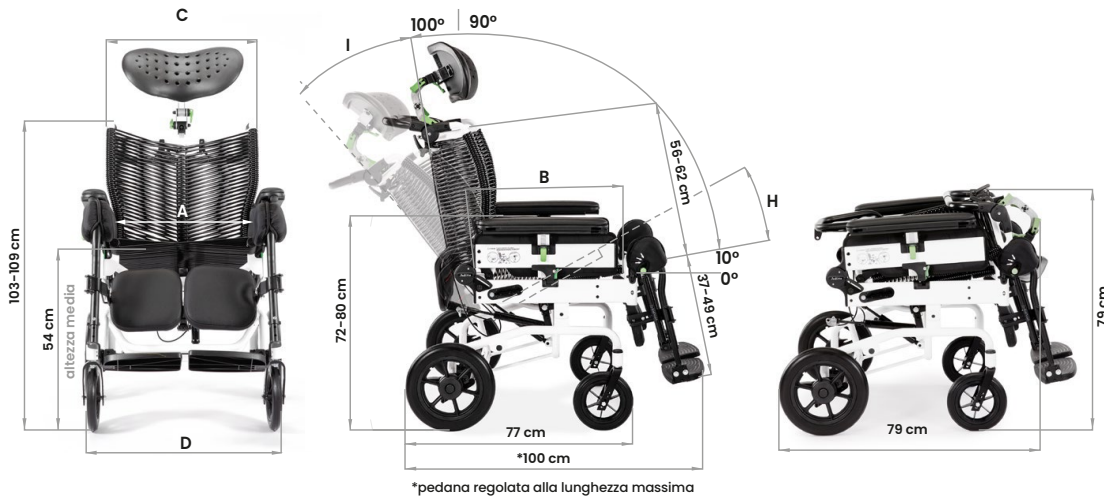

	A larghezza seduta	B profondità seduta	C larghezza schienale	D ingombro in larghezza	H inclin. seduta (basculam.)	I inclinazione schienale	Peso Ausilio	Portata massima	Altezza utente
<b>mis. 36</b>	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	38 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 40</b>	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	38 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 45</b>	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	67 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	41 kg	130 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 50</b>	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	72 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	42 kg	140 kg	da 140 a 190 cm

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

