

Il deambulatore GRILLO stimola e facilita lo schema del passo, allena a mantenere l'equilibrio del bacino e del tronco, organizza una visione più ampia e strutturata dello spazio, delle distanze e dell'ambiente che circonda il soggetto in posizione eretta, sviluppa l'autonomia fisica e l'indipendenza psicologica sperimentando la possibilità di operare da soli, senza l'aiuto di altri.

Grillo compensa la mancanza di equilibrio grazie ai supporti ergonomici e alla base stabile e consente così all'utente, di concentrare le proprie abilità residue solo nella deambulazione.

Grillo è versatile e personalizzabile grazie ai componenti intercambiabili senza l'uso di attrezzi.



Prodotto registrato FDA (USA)

Prodotto marcato CE

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



- **TELAIO LEGGERO** in alluminio, ABBATTIBILE per il trasporto e con **SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA BREVETTATO**.
- **SUPPORTO PELVICO** e **SUPPORTO TORACICO** imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza. Sostengono l'utente come fossero DUE MANI, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori. Il **SUPPORTO TORACICO** può essere regolato anche in inclinazione ed in senso antero-posteriore.
- **IMBRAGATURA ERGONOMICA** regolabile e facilmente removibile per il lavaggio. Sostiene l'utente in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- **MANUBRIO** removibile e regolabile, ha la funzione di un appoggiamani.
- **RUOTE** antiforatura e leggere: 2 anteriori

piroettanti con direzionatori; da cm. 15 (mis. mini e Small) e cm 17,5 (mis. Medium e Large) 2 posteriori piene fisse, da cm 20 (mis. mini e Small) e cm. 25 (mis. Medium e Large) adatte per uso interno ed esterno.

- Dispositivo **ANTIRETROMARCIA**, **FRENOTURA REGOLABILE** e **FRENO DI STAZIONAMENTO** sulle ruote posteriori, facilmente azionabile tramite pedale rosso.
- **DIREZIONATORI** anteriori.
- **PARACOLPI** semielastici per la protezione contro gli urti.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

ANTERIORE

Circonferenza interna supporto pelvico e toracico

da cm 74 a cm 120



PESO AUSILIO KG 22,5
PORTATA MASSIMA 90 KG

POSTERIORE

Circonferenza interna supporto pelvico e toracico

da cm 74 a cm 120




PESO AUSILIO KG 21,7
PORTATA MASSIMA 90 KG

DIMENSIONI UTENTE

ALTEZZA UTENTE (C):

GRILLO Medium, 110-165 cm

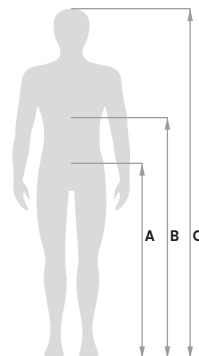

IMPORTANTE:

Assicurarsi che le altezze rappresentate in figura A e B rientrino nel range di misura indicato per i supporti.



DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Anteriore

Posteriore

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE >	Anteriore			Posteriore		
	PT	PA	P	PT	PA	P
COMPONENTI AGGIUNTIVI 925, 924, 930: puoi scegliere la misura più piccola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 Comprensivo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	 Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	 Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	 Comprensivo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie	 Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	 Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie
865 Poggiatesta multiregolabile	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925
925 Supporto toracico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
924 Supporto pelvico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
930 Imbragatura ergonomica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
926 Manubrio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	ND	ND
809 Antibrachiali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> con snodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> con snodo
943 Cinturini per avambraccio	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809
939 Maniglie ergonomiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> con snodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> con snodo
927 Manopole estraibili	ND	ND	ND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
919 Supporto lombare	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
918 Sedile pieghevole	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
815 Abduttore prossimale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
946 Sella ergonomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-C Divisorio con cosciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-SC Abduttore distale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
810 Barre di appesantimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
923 Maniglione di spinta per assistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
928 Ruote posteriori per base stretta con pedali. SOLO USO INTERNO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>