

L'alternativa all'allettamento



DM Marcato
 Iscritto al RDM

Attenzione!
 Leggere attentamente
 il manuale d'uso e
 manutenzione

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE	NOME DESTINATARIO/UTENTE:
ORM-	

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. Base stretta, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva:**
 - 1) si adatta alle forme dell'utente e impedisce il suo scivolamento, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della inclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua funzione di sostegno);
 - 2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**;
 - 3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**.
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali.** Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la visualità dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLI** imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE:** basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPOLPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE:** piroettanti da 5", posteriori con freni.


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

MISURA: 36 40 45 50

COLORE TAPPEZZERIA: grigio scuro grigio chiaro

COLORE TELAIO: bianco nero

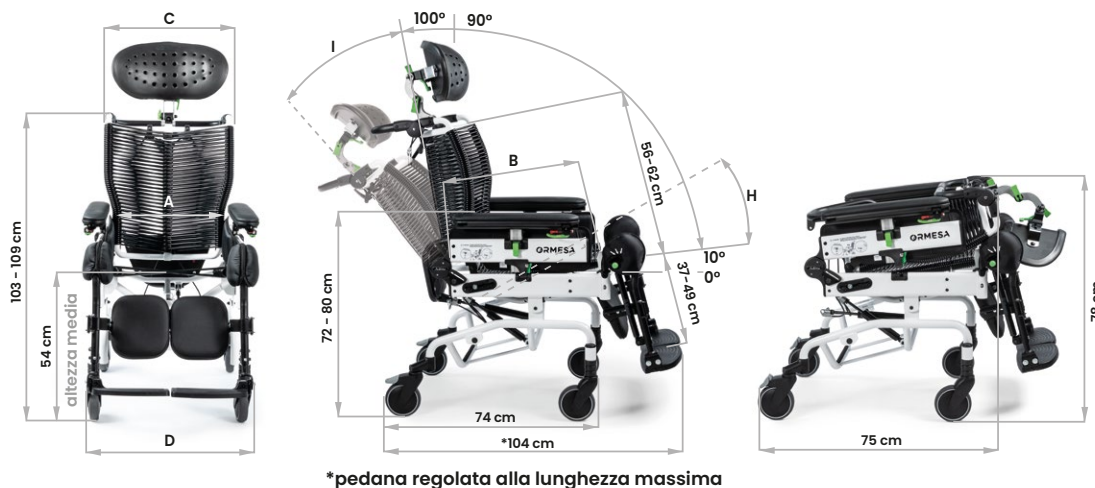

	A larghezza seduta	B profondità seduta	C larghezza schienale	D ingombro in larghezza	H inclin. seduta (basculam.)	I Inclinazione schienale	Peso ausilio	Portata max.	Altezza utente
mis. 36	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	60 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	37 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
mis. 40	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	60 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	37 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
mis. 45	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	65 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	39 kg	130 kg	da 140 a 190 cm
mis. 50	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	70 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	40 kg	140 kg	da 140 a 190 cm

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

COMPONENTI AGGIUNTIVI

<p><input type="checkbox"/> 824-R Tavolo reclinabile, regolabile in inclinazione e profondità con blocco di sicurezza.</p> <p><input type="checkbox"/> 824-F Tavolo fisso, regolabile in profondità con blocco di sicurezza.</p> <p>Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.</p>  <p>Igienico - hygienic resistente e leggero - durable and lightweight ergonomico - ergonomic regolazioni semplici e sicure - simple and safe adjustments</p> <p>New design!</p>	<p><input type="checkbox"/> 894 Cintura pelvica a 45°</p> 	<p><input type="checkbox"/> 834 Cuneo divaricatore imbottito regolabile.</p> 	
<p><input type="checkbox"/> 892 Tappezzeria imbottita per pedana</p> 	<p><input type="checkbox"/> 914 Bloccaggio per pedana unica</p> 	<p><input type="checkbox"/> 896 Tappezzeria imbottita per tavolo</p> 	<p><input type="checkbox"/> 916 Fascia poggiambracci imbottita</p> 
<p><input type="checkbox"/> 933 Asta portaflebo</p> 	<p><input type="checkbox"/> 936 Tappezzeria asportabile per poggiatesta</p> 	<p><input type="checkbox"/> 938 Tappezzeria impermeabile</p> 	<p>975 supporto temporoparietale multiregolabile posizionabile a destra o a sinistra.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 pz. <input type="checkbox"/> 2 pz. NEW</p> 
<p><input type="checkbox"/> 976 supporto fronto-temporo-parietale multiregolabile posizionabile a destra o a sinistra.</p> <p>NEW</p> 	<p>Note:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		