

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE <b>ORM-</b>	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. **Base stretta**, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva**:  
1) **si adatta alle forme** dell'utente e **impedisce il suo scivolamento**, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua **funzione di sostegno**);  
2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**;  
3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**.
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali**. Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la **visualità** dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLI** imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE**: basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPOLPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE: anteriori da 8"; posteriori da 12" con FRENI A TAMBURO** azionabili tramite un unico comando a pedale.



DM Marcato CE  
Iscritto al RDM



Attenzione!  
Leggere attentamente  
il manuale d'uso e  
manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

MISURA:  36  40  45  50

COLORE TAPPEZZERIA:  grigio scuro  grigio chiaro

COLORE TELAIO:  bianco  nero

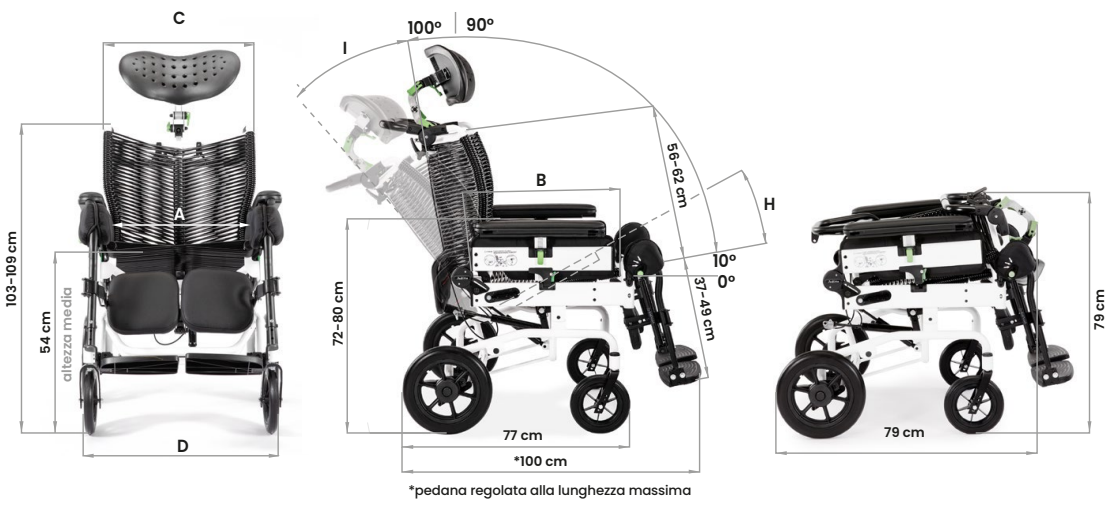

	A larghezza seduta	B profondità seduta	C larghezza schienale	D ingombro in larghezza	H inclin. seduta (basculam.)	I inclinazione schienale	Peso Ausilio	Portata massima	Altezza utente
<b>mis. 36</b>	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	38 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 40</b>	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	38 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 45</b>	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	67 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	41 kg	130 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 50</b>	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	72 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	42 kg	140 kg	da 140 a 190 cm

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

ITALIANO - Cod. 22079 - 03.26



**COMPONENTI AGGIUNTIVI**

<p><input type="checkbox"/> <b>824-R</b> Tavolo reclinabile, regolabile in inclinazione e profondità con blocco di sicurezza.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>824-F</b> Tavolo fisso, regolabile in profondità con blocco di sicurezza.</p> <p>Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.</p>  <p><b>Igienico - hygienic, resistente e leggero - durable and lightweight, ergonomico - ergonomic, regolazioni semplici e sicure - simple and safe adjustments</b> <b>New design!</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>894</b> Cintura pelvica a 45°</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>834</b> Cuneo divaricatore imbottito regolabile</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>891</b> Ancoraggi (4 anelli) per l'ancoraggio della carrozzina ai fini del trasporto in veicoli omologati</p>  <p><b>CRASH TESTED</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>892</b> Tappezzeria imbottita per pedana</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>905</b> Kit freno manuale</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>914</b> Bloccaggio per pedana unica</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>896</b> Tappezzeria imbottita per tavolo</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>916</b> Fascia poggiambracci imbottita</p> 
<p><input type="checkbox"/> <b>932</b> Ruotine antiribaltamento</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>933</b> Asta portaflebo</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>936</b> Tappezzeria asportabile per poggiatesta</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>938</b> Tappezzeria impermeabile</p> 	<p><b>975</b> supporto temporoparietale multiregolabile posizionabile a destra o a sinistra.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 pz. <input type="checkbox"/> 2 pz.</p> <p><b>NEW</b></p> 
<p><input type="checkbox"/> <b>976</b> Supporto fronto-temporo-parietale multiregolabile posizionabile a destra o a sinistra.</p> <p><b>NEW</b></p> 	<p>Note:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			