



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

CLIP



CLIP

Per famiglie dinamiche

CLIP di Ormesa è un **sistema di seduta pratico e veloce, per persone con disabilità, bambini e adulti.**

Facile da gestire, chiudere e spingere.

Le sue ruote sono adatte a tutti i terreni e le **operazioni di chiusura** sono **semplici e rapide.**

Grazie a un'**ampia gamma di componenti disponibili**, si adatta facilmente a diverse esigenze.

Il suo **peso ridotto** e la **semplicità di chiusura**, ne fanno la soluzione ideale per quelle famiglie che si trovano spesso in viaggio o che vivono in città, con passaggi obbligati e spesso impervi su marciapiedi e zone affollate.



PRODOTTO
MARCATO 

CLIP è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



Clip 1, 2, 3 ha superato il **CRASH TEST** secondo la norma **ISO 7176/19**

Leggero e robusto

schienale e seduta con barre interne in alluminio, estraibili



Struttura a doppia crociera

posizionata dietro lo schienale e sotto la seduta per garantire supporto e comfort

Barre interne

in alluminio, presenti sia nello schienale che nella seduta. Sono anche modellabili per rispondere a determinate necessità posturali.

Garantiscono la giusta rigidità allo schienale e alla seduta, mantenendo tutta la traspirabilità .

Facilmente estraibili per il lavaggio della tappezzeria.



Schienale

regolabile in inclinazione su 3 posizioni, tramite chiusure lampo. Presente sul retro il cestino porta oggetti.

Seduta

leggermente inclinata per aumentare il comfort.





NEW

Maniglie regolabili

in altezza. **SENZA L'USO DI ATTREZZI!**



Pedana/e estraibile/i

Estraibile e regolabile in altezza per le misure 1, 2 e 3.
Regolabili in altezza e ribaltabili per la misura 4.



NEW

Ruote

imperforabili, adatte a tutti i tipi di terreno.

Misure 1, 2, 3: anteriori piroettanti da cm 15; posteriori da cm 20, **con freni indipendenti.**

Misura 4: anteriori piroettanti da cm 17.5; posteriori da cm 25, **con freni indipendenti a tamburo.**



Pedalino per superamento gradini.

Alta performance

Rivestimento all'avanguardia


CLIP ha una **tappezzeria estraibile** estremamente **traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare**.

Nella parte centrale **dello schienale e della seduta** il rivestimento è composto da **materiale traspirante e altamente innovativo**, sia internamente che esternamente.

Il tessuto interno è tridimensionale, **leggero** e garantisce:

- **un'alta circolazione dell'aria**
- **un'ottimale distribuzione del peso**
- **un ottimo comfort.**

Il tessuto esterno è anche estremamente **resistente all'abrasione** ed è **ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.

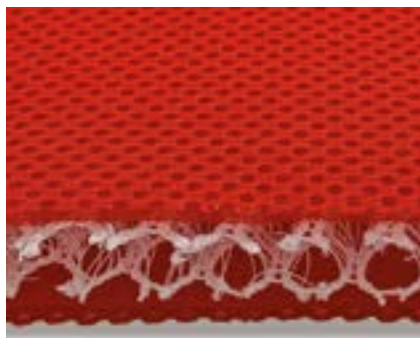

**Facilmente lavabile
con tempi di asciugatura
veramente rapidi!**



CLIP[•]1•2•3





CLIP[•]4



Componenti



835 Poggiatesta con protezioni parietali.



816 Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco.



853 Pettorina a bretellaggio.



906 Cintura a bretellaggio a cinque punti.



903 Pettorina a bretellaggio a cinque punti.



894 Cintura pelvica a 45°, compresa nel modello base.



834N Divaricatore imbottito.

Componenti



858 Cestino porta oggetti.



827 Cinturini fermapiedi.



812 Direzionatori ruote anteriori.



819 Cappottina.



825 Sacca parapioggia.
da fissare alla cappottina 819.



818 Sacca termica.

891 Ancoraggi (anelli)

Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati,...).


Solo per Clip 1, 2 e 3

Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.






CLIP^{1.2.3}

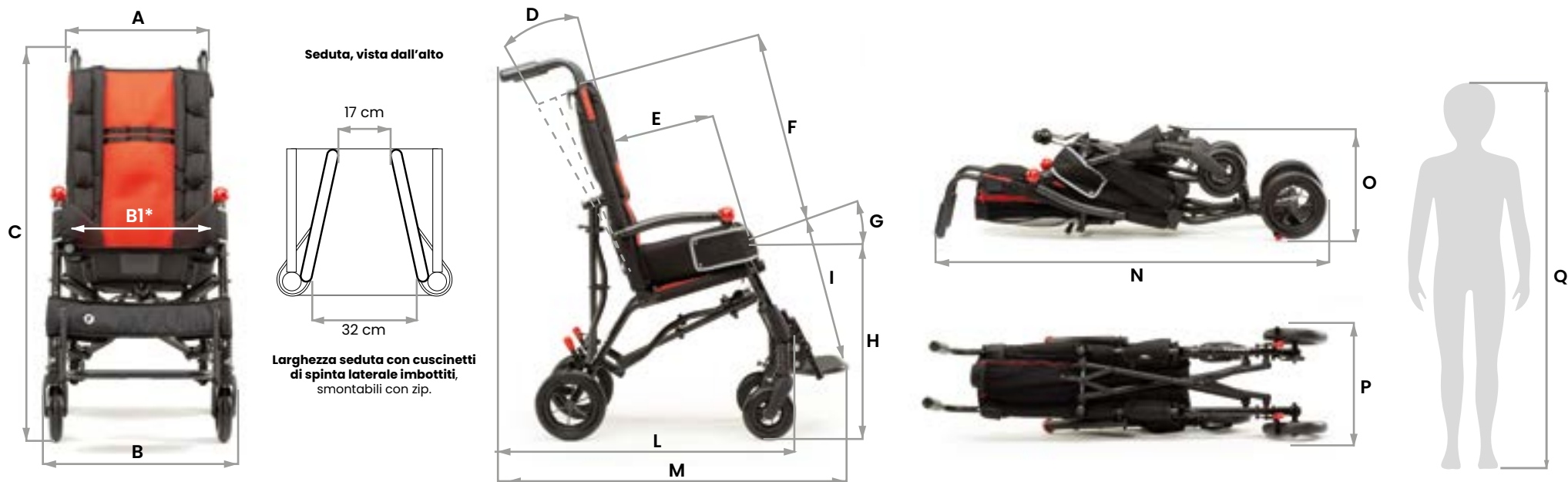


CLIP	A Larghezza schienale	B Ingombro in larghezza	B1* Larghezza seduta senza cuscinetti di spinta	C Altezza totale	D Inclinazione schienale	E Profondità seduta	F Altezza schienale	G Inclinazione seduta	H Altezza se- duta-terra	I Altezza peda- na-seduta	L Distanza maniglio- ne-ruota	M Lunghezza totale	N Lunghezza passeggino chiuso	O Altezza passeggino chiuso	P Larghezza passeggino chiuso	Q Altezza utente	Peso Ausilio	Portata Massima
1	40 cm	51 cm	39 cm	101-108 cm	0° - 12°	25 cm	55 cm	18° cm	46 cm	12 - 20 cm	78 cm	84 cm	114 cm	30 cm	34 cm	110 - 125 cm	10,3 kg	30 kg
2	40 cm	51 cm	39 cm	101-108 cm	0° - 12°	30 cm	59 cm	18° cm	48 cm	21 - 31 cm	78 cm	92 cm	114 cm	30 cm	34 cm	120 - 140 cm	10,5 kg	35 kg
3	40 cm	51 cm	39 cm	106-113 cm	0° - 12°	35 cm	63 cm	18° cm	49 cm	25 - 35 cm	84 cm	98 cm	118 cm	34 cm	36 cm	135 - 155 cm	10,7 kg	40 kg

CLIP⁴

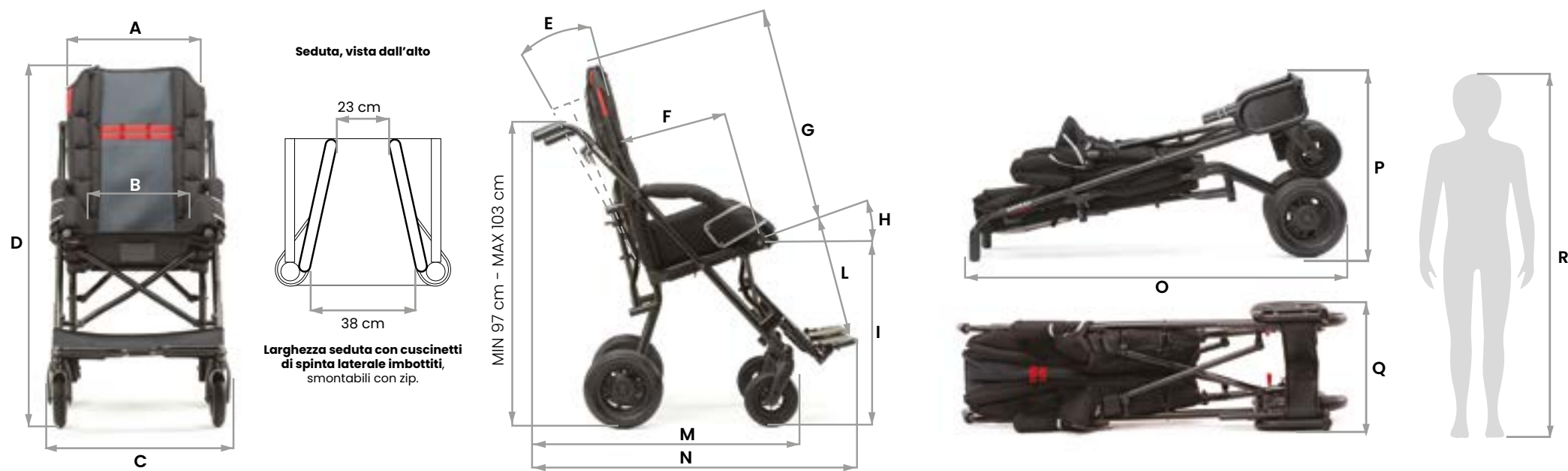

CLIP	A Larghezza schienale	B Larghezza seduta sen- za cuscinetti di spinta	C Ingombro in larghezza	D Altezza totale	E Inclinazione schienale	F Profondità seduta	G Altezza schienale	H Inclinazione seduta	I Altezza se- duta-terra	L Altezza peda- na-seduta	M Distanza ruota maniglia	N Lunghezza totale	O Lunghezza passeggino chiuso	P Altezza passeggino chiuso	Q Larghezza passeggino chiuso	R Altezza utente	Peso Ausilio	Portata Massima
4	45 cm	45 cm	57 cm	113 cm	0° - 10°	38 cm	71 cm	20°	59 cm	37 - 47 cm	86 cm	108 cm	117 cm	60 cm	37 cm	150 - 170 cm	13,9 kg	76 kg

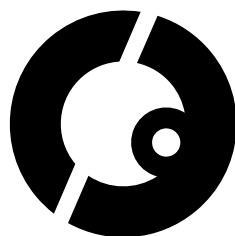

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

