



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**Trolli**





# Mobilità in carrozzina pratica e smart.

Il **Trolli** di Ormesa è una carrozzina per ragazzi e adulti compatta e leggera, progettata per essere **performante in qualsiasi contesto** di utilizzo.

Ha una **struttura stabile e resistente** garantita dalla **doppia crociera** posizionata dietro lo schienale e sotto la seduta che conferisce maggiore stabilità e comfort.

Grazie al suo **sistema di chiusura brevettato a livello internazionale**, Trolli si chiude rapidamente con una sola manovra, occupando il minimo ingombro. **Una volta chiuso rimane compatto** e può essere trasportato sulle ruote posteriori **come fosse un trolley da viaggio**.

La **tappezzeria** è **realizzata con materiali tecnologici all'avanguardia**: è estremamente **traspirante, resistente, facilmente lavabile, ignifuga**.

Disponibile in due modelli: **Trolli T30** e **Trolli T60 con autospinta**.

Grazie a un'**ampia gamma di componenti disponibili**, risponde facilmente a diverse esigenze.



**Trolli ha superato il Crash Test** secondo le norme **ISO 7176/19** e **ANSI RESNA WC/19**

PRODOTTO  
MARCATO **CE**

TROLLI è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



# Autonomia e performance

## Due versioni per ogni tipo di esigenza: Trolli



Facile da spingere e manovrare, può essere usato sia su **percorsi domestici interni che in spazi esterni**, il tutto in completa **praticità e comfort**.

Il suo **peso ridotto** e la **semplicità di chiusura**, rende semplice qualsiasi sollevamento o spostamento: perfetto se hai bisogno di riportarlo nella macchina. È così maneggevole che **si spinge anche con una sola mano**. Questo rende il Trolli la **soluzione ideale per le famiglie dinamiche** spesso in viaggio e che sono alla ricerca di **stabilità, praticità e comfort, tutto in uno!**

Il Trolli T30 è dotato di un **sistema frenante collegato alle manopole** della carrozzina che può essere azionato direttamente dall'accompagnatore.

Le **ruote, con profilo originale "Ormesa Design"**, si adattano ad ogni tipo di terreno offrendo massimo comfort sia al caregiver che alla persona seduta:

- **Ruote anteriori** piene (imperforabili) piroettanti da 7" (cm 17) per le misure 36 e 40; da 8" (20 cm) per la misura 43.
- **Ruote posteriori** piene (imperforabili) con **freni indipendenti a tamburo** da 10" (25 cm) per le misure 36 e 40; da 12" (30 cm) per la misura 43. **Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote.

nce

# T30 e Trolli T60 con autospinta

Il **Trolli T60 con autospinta** è una carrozzina progettata per semplificare la quotidianità senza compromettere la funzionalità e il comfort. Leggero e facile da manovrare, anche questa versione del Trolli è pieghevole e trasportabile con facilità.

È dotato di un **sistema frenante manuale** azionabile direttamente dalla persona seduta.

Le **ruote dal design Ormesa** garantiscono grip ottimale in ogni terreno:

- **Ruote anteriori** piene (imperforabili) piroettanti da 7" (17 cm).
- **Ruote posteriori** di autospinta da 22" (56 cm) con **freno manuale**. **Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote.



# Design funzionale



## Pieghevole in una sola manovra

**Trolli T30 e Trolli T60 autospinta** sono dotati di un **telaio pieghevole** in alluminio, verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Grazie al **sistema di chiusura brevettato a livello internazionale**, Trolli si **chiude** rapidamente **con una sola manovra**, le pedane girevoli sono in linea con il telaio occupando il minimo ingombro. **Una volta chiusi rimangono compatti**: questo permette di trasportarli sulle ruote posteriori con estrema facilità.

Il **peso ridotto** e la **semplicità di chiusura**, rendono semplice qualsiasi sollevamento o spostamento: sono la **soluzione ideale per trasferimenti di persone con difficoltà motorie** negli aeroporti, nelle stazioni, per permettere l'accesso a spazi stretti e per **rispondere alle esigenze di mobilità**.



# Come un trolley da viaggio



# Estrema traspirabilità



## Rivestimento all'avanguardia

La tappezzeria di **Trolli T30 e Trolli T60 autospinta** ha una **struttura innovativa**, realizzata con materiali tecnologici all'avanguardia, **estremamente traspirante a contatto con la pelle**. È garanzia di:

- > **Igiene:** la trama dal design essenziale permette una eccellente traspirabilità che riduce la sudorazione e la formazione dei batteri
- > **Lavaggio:** nonostante non sia estraibile la composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio.
- > **Tempi di asciugatura rapidi.**
- > **Resistenza:** la trama mantiene la performance anche a carichi elevati.
- > **Ignifugicità:** classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.

# Caratteristiche tecniche e regolazioni



## Seduta

Ergonomica e leggermente basculata per impedire lo scivolamento del bacino e garantire maggior comfort. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.



## Maniglie

di spinta con freni manuali e di stazionamento. Utilissime per gestire il dispositivo nei diversi contesti. Non disponibili nella versione Trolli T60 con autospinta.



## Pedane

regolabili in altezza, ribaltabili e girevoli in linea con il telaio senza ingombro. Presente anche la fascia poggipolpacci per un maggiore comfort.

# Componenti



**947 Cintura pelvica ad angolo variabile**

Disponibile in due misure.



**920 Cintura pelvica a quattro punti**

Disponibile in due misure.



**853 slim Pettorina sagomata a quattro punti**



**853 Pettorina a bretellaggio**



**958 Pelotte al bacino imbottite**

con imbottitura interna asportabile. Riducono la larghezza della seduta di 4 cm o di 8 cm con l'imbottitura supplementare. Non disponibile per Trolli T60 con autospinta.



**968 Imbottiture per braccioli**

facilmente estraibili e lavabili

# Componenti



**960 Fermatalloni**



**956 Pedane con regolazione dell'inclinazione**



**858 Cestino porta oggetti**



**812 Direzionatori ruote anteriori**



**951 Maniglie di spinta regolabili in altezza.**

Aumenta l'altezza massima di 7 cm (94-101).



**966 Kit di trasformazione da Trolli T30 a Trolli T60**

Per la misura 43 verranno fornite anche le ruote anteriori



**891 Ancoraggi (anelli)**


Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati...)

*Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.*

# Trolli T30

## misure e pesi

misure in cm.

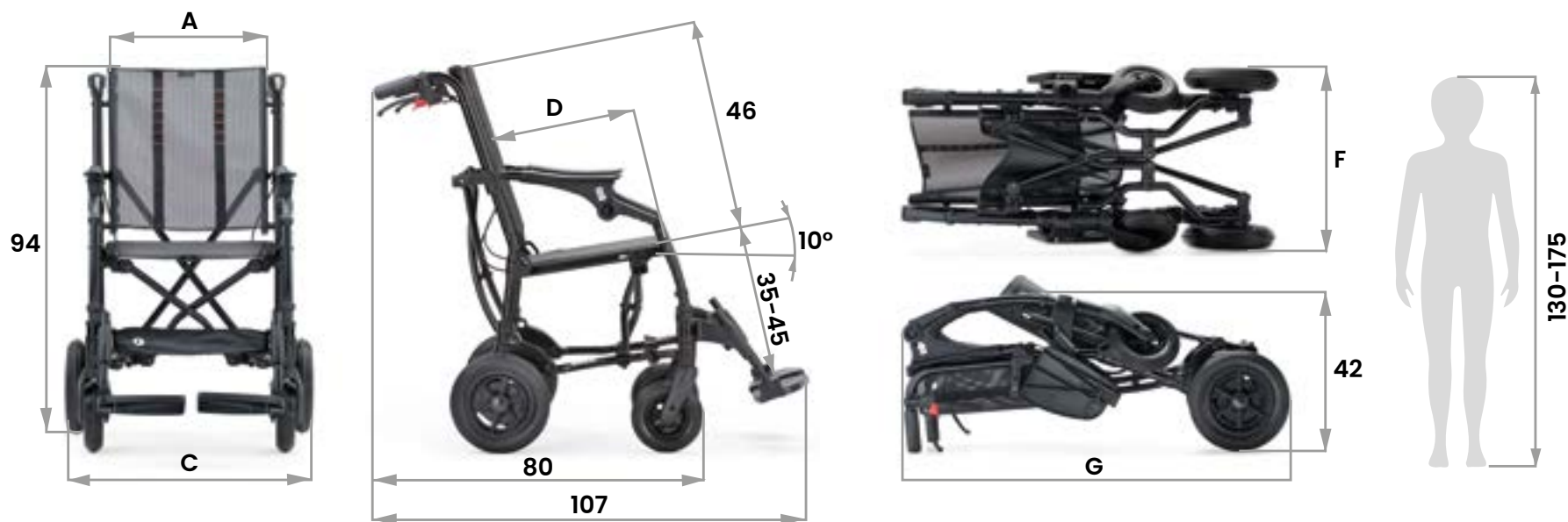

|                  | A     | C     | D     | F     | G     | Peso<br>Trolli T30 | Portata<br>Massima |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>misura 36</b> | 36 cm | 59 cm | 36 cm | 42 cm | 94 cm | 13,1 kg            | 80 kg              |
| <b>misura 40</b> | 40 cm | 63 cm | 40 cm | 46 cm | 94 cm | 13,6 kg            | 90 kg              |
| <b>misura 43</b> | 43 cm | 66 cm | 40 cm | 46 cm | 97 cm | 14,1 kg            | 110 kg             |







# Trolli T60 autospinta

## misure e pesi

misure in cm.

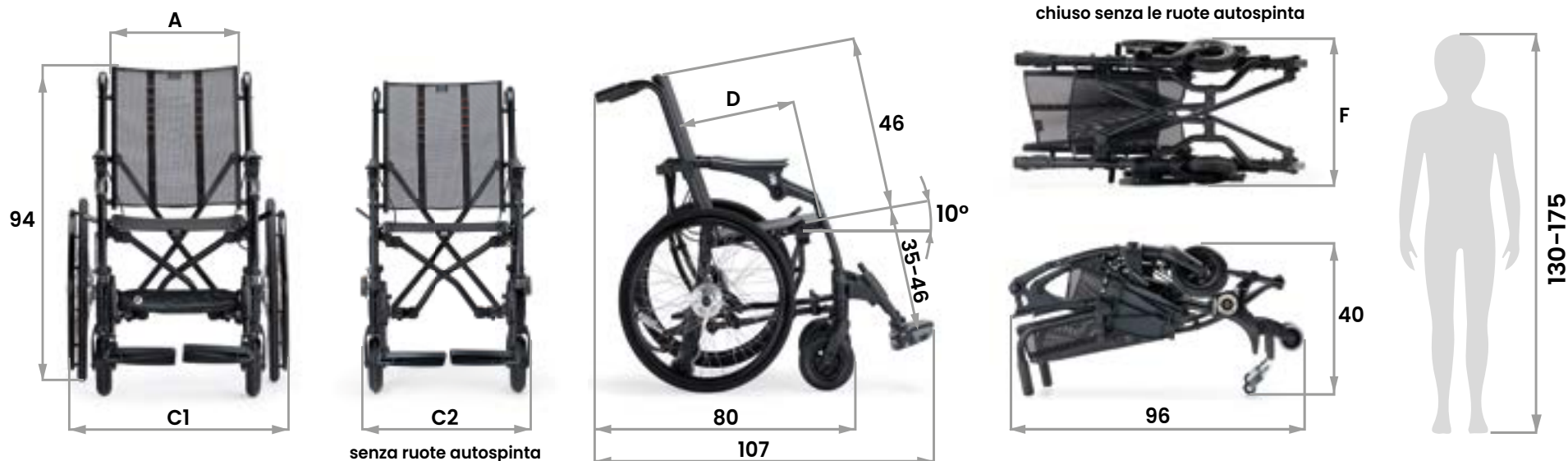

|                  | A     | C1    | C2    | D     | F     | Peso Trolli T60<br>con autospinta | Portata<br>Massima |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>misura 36</b> | 36 cm | 64 cm | 49 cm | 36 cm | 42 cm | 16,5 kg                           | 80 kg              |
| <b>misura 40</b> | 40 cm | 68 cm | 53 cm | 40 cm | 46 cm | 17 kg                             | 90 kg              |
| <b>misura 43</b> | 43 cm | 71 cm | 56 cm | 40 cm | 46 cm | 17,5 kg                           | 110 kg             |

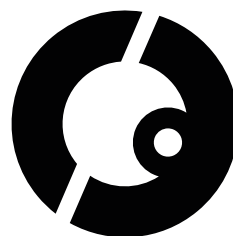

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
[ISO 13485](#)

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**

